

## Relax and Tone

Массаж, тонизирование и расслабление

### Технические характеристики товара

Название модели- Relax and Tone  
Номер модели-BJ-9789  
Потребление энергии-максимально 25 Вт  
Вес -1 кг

### Изготовлено из:

-покрытие (ABS)  
-верхняя крышка (PC)  
-ручка (TPR)

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации, чтобы правильно и эффективно использовать устройство.**

#### Инструкция

1. Вставить/ поменять насадку

Удалить крышку с ячейками (шаг 1),

Нажмите на вогнутые части на вращающемся основании и поднимите надетую насадку (шаг 2).

Вставьте другую насадку и присоедините крышку с ячейками при необходимости

2. Включите вилку в розетку


3. Поверните рычаг включения по часовой стрелке, чтобы прибор включился, продолжайте поворачивать в том же направлении, чтобы прибор работал быстрее. Поворачивайте против часовой стрелки, чтобы прибор работал медленнее.

4. Для достижения наиболее удобной и эффективной работы можно держать устройство двумя способами:

- держите прибор по центру (шаг 3),

- держите прибор за ручку (шаг 4),

5. После использования, поверните диск против часовой стрелки до упора (диск станет в положение OFF), затем выньте вилку из розетки.

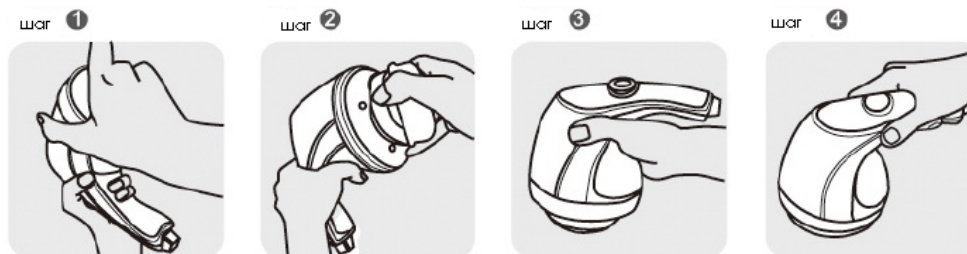

### Свойства товара

- портативный и легкий
- нарастающая регулировка скорости
- высокая скорость вращения 2500 вращений в минуту
- удобная мягкая резиновая ручка
- 4 насадки для различного использования
- придает мышцам тонус и снимает напряжение

### Техническое обслуживание и хранение

- всегда выключайте прибор из розетки, если Вы им не пользуетесь
- прибор нельзя мочить или подвергать воздействию воды
- не поднимайте прибор, держа за шнур
- протирайте прибор мягкой тканью и нейтральным моющим средством

### Внимание

- не используйте прибор, если Вы беременны, у Вас больное сердце, Вы страдаете от физических травм, перед использованием проконсультируйтесь с терапевтом, если Вы не уверены, можно ли Вам пользоваться этим прибором.
- пользуйтесь прибором только через час после приема пищи

- храните прибор в недоступном для детей месте
- не используйте прибор на одном месте дольше 15 минут
- не используйте прибор для головы
- не пользуйтесь прибором, если температура окружающей среды выше 37С или 100F.
- если во время использования прибора Вы испытываете тошноту, головокружение, боль в груди или другие неприятные симптомы, прекратите пользоваться прибором и немедленно обратитесь к врачу.

### Внимание

Защитную насадку можно использовать только с рифленной или плоской насадкой. Никогда не используйте защитную насадку с роликовыми или шлифовальными насадками.

Не используйте прибор без защитной насадки в тех местах, где волосы могут попасть в прибор (шея или плечи).



используйте защитную насадку, чтобы не повредить волосы



неправильное использование прибора

### На каких местах можно пользоваться прибором

Предплечья (придаем тонус мышцам верхней части руки)

Плечи (облегчает напряжение, возникающее в шее и спине)

Брюшной пресс (тонизирует мышцы брюшного пресса- у Вас становится более стройная талия)

Бедра (придает тонус мышцам брюшного пресса и ягодичным мышцам)

Верхняя часть бедра (снимает напряжение мышц бедра и делает ноги более стройными)

Игры (помогает расслабиться ноющим мышцам ног)

Ступни (удаляет мозоли и жесткую кожу)



### Детали и назначение деталей

1. Рычаг включения прибора
2. Защитная насадка
3. Шлифовальная насадка (для ног)
4. Шариковая насадка
5. Плоская насадка
6. насадка с волнистой поверхностью

